

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/mrc-myotalea-myochew-ortodontyczna-wkladka-szczoteczka-do-zucia-p-1947.html>



MRC Myotalea Myochew ortodontyczna wkładka - szczoteczka do żucia

Cena brutto	245,00 zł
Cena netto	226,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MRC

Opis produktu

Myotalea Myochew ortodontyczna wkładka - szczoteczka do żucia dla dzieci od 2-8 lat. Wspiera oddychanie przez nos i rozwój zębów i szczęk poprzez ćwiczenie mięśni jamy ustnej.


Myotalea® Myochew™ aktywnie wspiera żucie u dzieci w wieku od dwóch do ośmiu lat, w celu poprawy siły mięśni szczęki, oddychanie przez nos i ćwiczenie języka. Zawiera również włosie, które pomaga czyścić zęby. Jest doskonałym dodatkiem do urządzeń Myobrace i Myosa do korekcji problemów z oddychaniem i mięśniami jamy ustnej. Myochew to angażujący i skuteczny sposób, aby pomóc dzieciom budować siłę mięśni języka i szczęki, jednocześnie rozwijając zdrowe nawyki oddechowe.

Myotalea Myochew jest przeznaczona dla dzieci w wieku od dwóch do ośmiu lat i zachęca do oddychania przez nos, jednocześnie poprawiając funkcjonowanie mięśni jamy ustnej, a także pomaga w czyszczeniu zębów za pomocą wbudowanego włosia.

Myochew jest również odpowiednia dla dzieci o specjalnych potrzebach, które wymagają poprawy oddychania, funkcji języka i higieny jamy ustnej.

Urządzenie zapewnia dzieciom przyjemny i skuteczny sposób korygowania tych problemów i wspomaga rozwój zębów i szczęk, jednocześnie poprawiając ogólny stan zdrowia poprzez zniechęcanie do oddychania przez usta.

Cechy produktu:

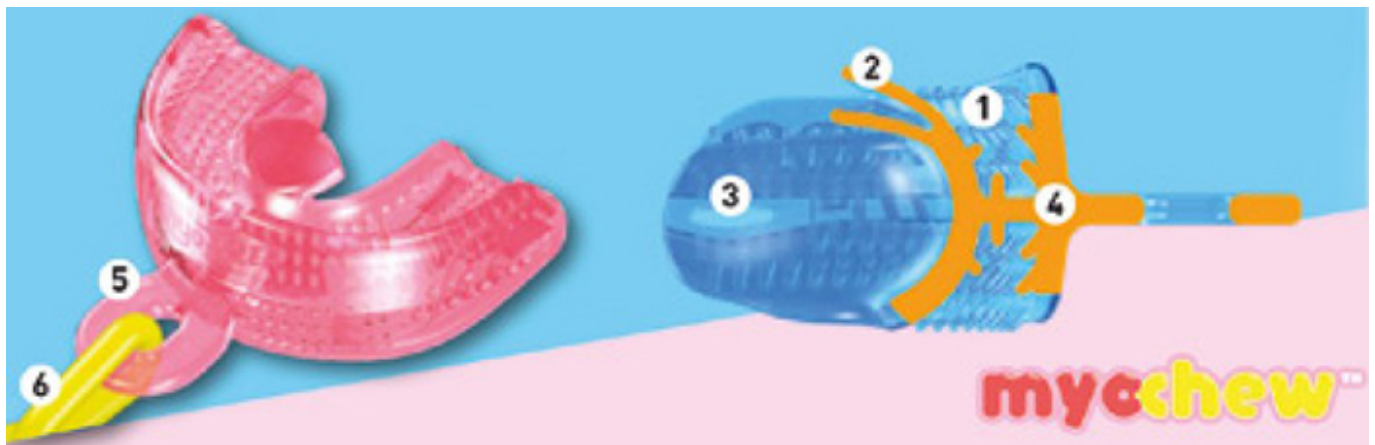


1. **Wystające włosie** - do czyszczenia zębów.
2. **Tunel** - wzmacniający język.
3. **Sprężynująca podstawa** - stymuluje rozwój szczęki.
4. **Podwójny łuk** - wspiera oddychanie przez nos
5. **Wypustka** - umożliwia żucie podczas ząbkowania.
6. **Odpinany pasek** - zapobiega upuszczaniu na podłogę.

Instrukcja użycia:


Krok 1 - Trzymaj Myochew tunelem na język skierowany do góry.




Krok 2 - Umieść Myochew w ustach.

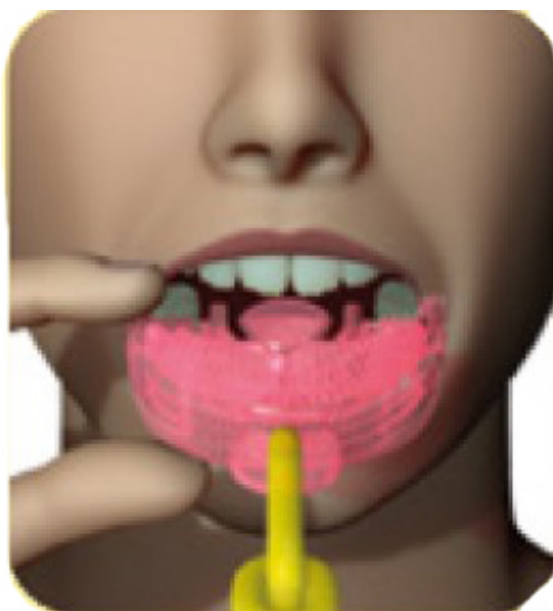


Krok 3 - Zamknij usta i oddychaj przez nos.

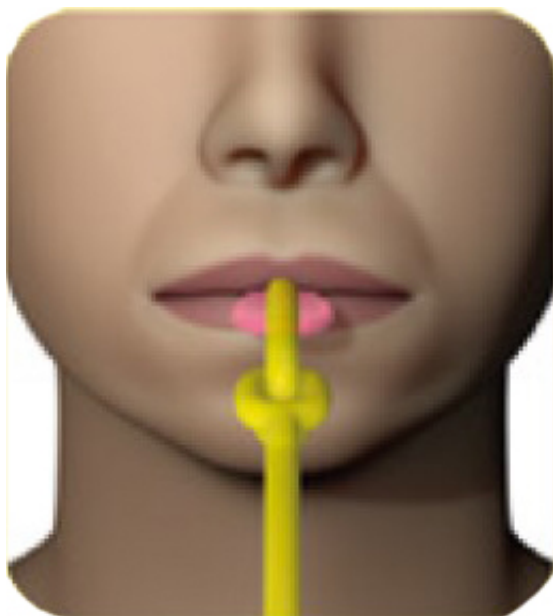

Krok 4 - Kilkakrotnie naciśnij tunel języka.

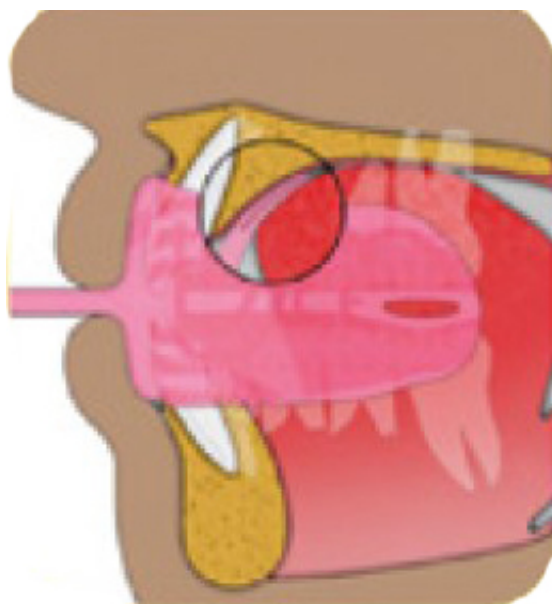

Krok 5 - Delikatnie przeżuwaj i kilkakrotnie naciśnij sprężynującą podstawę.

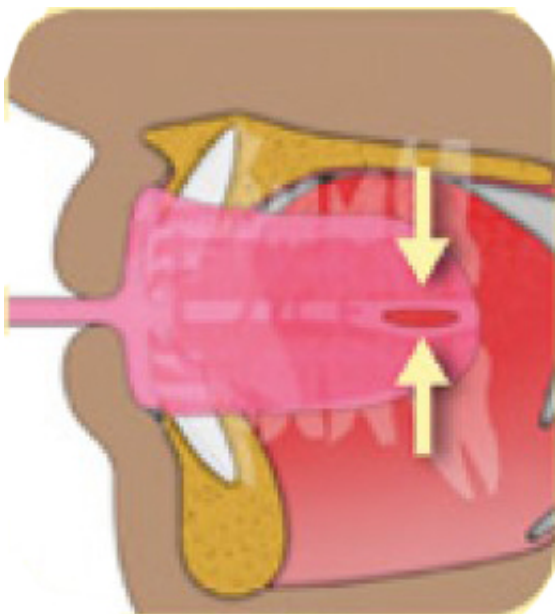

STOSOWAĆ DWA RAZY DZIENNIE PRZEZ 10-15 MINUT

Korzyści z używania Myochew

- Prosty skuteczny sposób na poprawę oddychania, wzmocnienia mięśni jamy ustnej i utrzymanie higieny jamy ustnej;
- Przyjazne dla użytkownika urządzenie dla dzieci w różnym wieku;
- Odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach;
- Wykonane z silikonu klasy medycznej, zapewniającego najwyższy komfort i optymalną tolerancję.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR APARATU: niebieski , różowy